

Brillante Ergebnisse bei Keramik

Das Poliersystem für Keramik enthält leistungsstarke Diamantpolierer in einem dreistufigen System: Abtragen und Korrigieren, Vorpolieren und Glätten sowie Hochglanzpolieren. Das herausragende Oberflächenergebnis nach dem Hochglanzpolieren entspricht dem eines Glanzbrandes.



* Bitte mit Wasserkühlung und drucklos arbeiten.

20 JAHRE
ORIDIMA

ORIDIMA wurde vor über 20 Jahren gegründet und gehört heute als Hersteller und Lieferant hochwertiger Dentalprodukte für den Praxisbedarf zu einem der führenden Anbieter in Deutschland. Exzellent ausgebildete und erfahrene Medizinprodukte-Berater stehen im gesamten Bundesgebiet als Gesprächspartner für Zahnärztinnen und Zahnärzte persönlich zur Verfügung.

Wir sind für Sie da! Ihr Team von ORIDIMA.


Professionelle Poliersysteme – für jedes Material der richtige Polierer

Zirkoniumdioxid
Abtragen und Korrigieren

Composites
Vorpolieren und Glätten

Keramik
Hochglanzpolieren


Bracketkleberreste
Super-Hochglanzpolieren

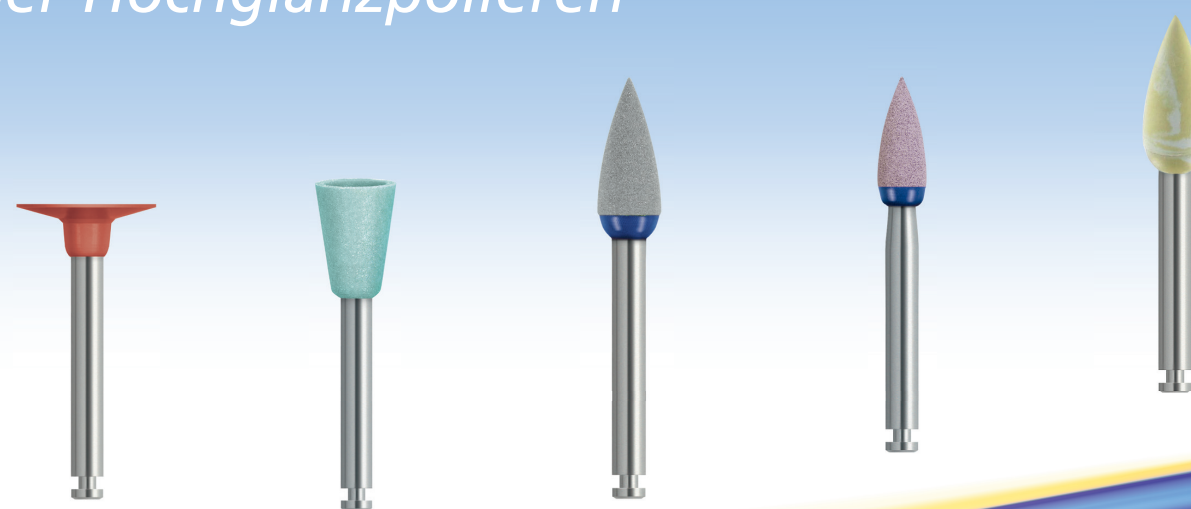

Neben einem umfangreichen Polierer-Sortiment für alle klassischen Anwendungen bietet ORIDIMA Poliersysteme, die speziell für Materialien wie Composite, Keramik, Zirkon und Bracketkleberreste entwickelt wurden

Vorbildliche Polierergebnisse bei Composites

Dieses zweistufige Poliersystem für Composite besteht aus hochdiamanthaltigen Polierern mit äußerst langer Lebensdauer. Zur Verfügung stehen fünf verschiedenen Formen. In der ersten Arbeitsstufe wird das Compositematerial mit Vorpolierern leicht und schnell abgetragen. Anschließend lässt sich mit den Super-Hochglanzpolierern ein exzellentes Ergebnis erzielen.

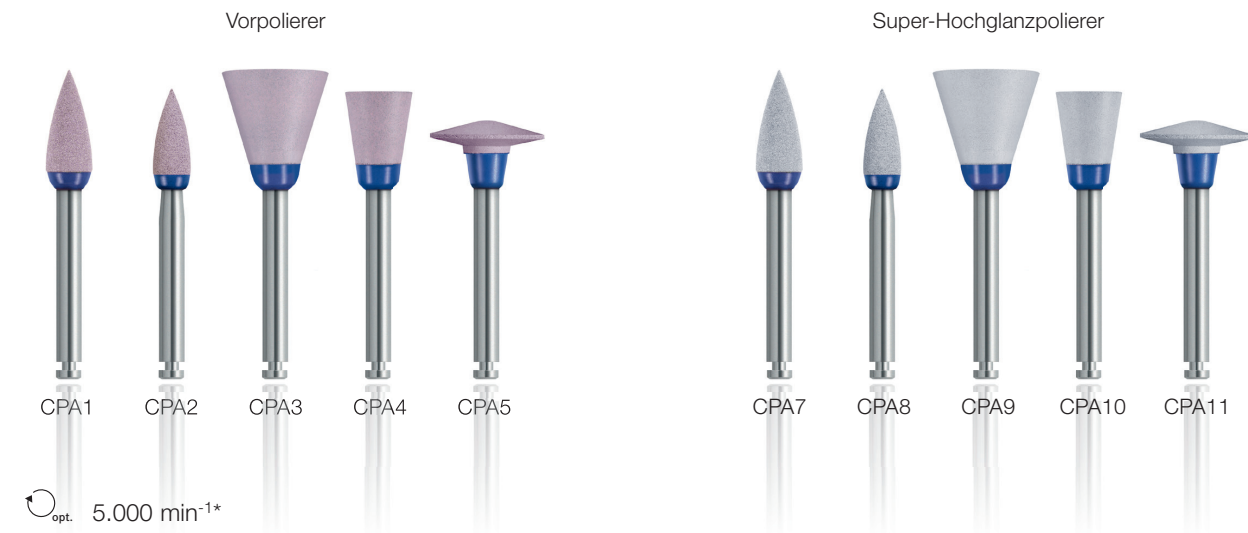

* Bitte mit Wasserkühlung und drucklos arbeiten.

Poliersystem für Zirkoniumdioxid


Für das extrem harte Zirkon-Material wurde dieses besondere Poliersystem für intra- und extraorale Arbeiten entwickelt. Die Polierkörper bestehen aus einer speziellen Diamantkornmischung, die exakt auf die einzelnen Arbeitsschritte Korrektur, Vorpolitur und Hochglanzpolitur abgestimmt sind und ein hocheffektives Arbeiten mit glänzenden Ergebnissen an Zirkon-Restaurationen ermöglichen.



* Bitte mit Wasserkühlung und drucklos arbeiten.

Für besonders ästhetische Composites


Zur Erzielung zahnähnlichster Transluzenzen von Composites, die auf Nano-Füllstofftechnologien basieren sind die ultrahochdiamanthaltigen Polierer dieses 2-stufigen Systems bestens geeignet. Eine vorbehandelte Diamantkornmischung der Polierkörper gewährleistet, dass extrem glatte und hochglänzende Oberflächen möglich sind.

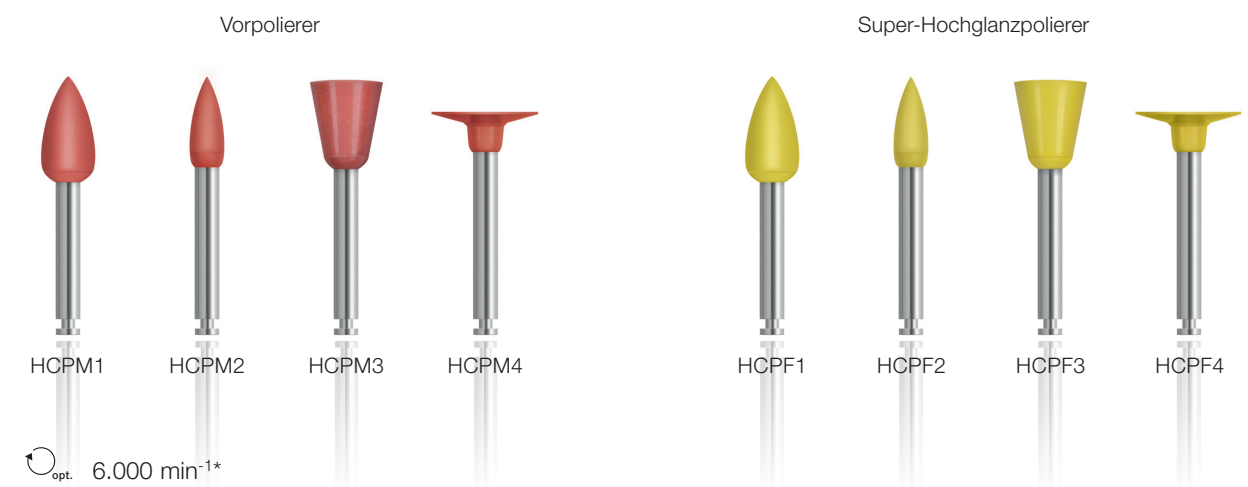

* Bitte mit Wasserkühlung und drucklos arbeiten.

KFO-Spezialpolierer zur Entfernung von Klebstoffresten

Die rückstandsfreie Entfernung von Bracketkleberresten bei gleichzeitigem Schutz der natürlichen Zahnschmelz in einem Arbeitsgang ist das eindeutige Plus dieses einstufigen Poliersystems. Eine spezielle Körnung mit weichem Schleifgut macht es möglich, dass auch bei direktem Kontakt mit dem Zahnschmelz der natürliche Zahn nicht geschädigt wird. Gleichzeitig bewirkt dieses Material, dass die Polierer eine außergewöhnlich hohe Verschleißfestigkeit besitzen.

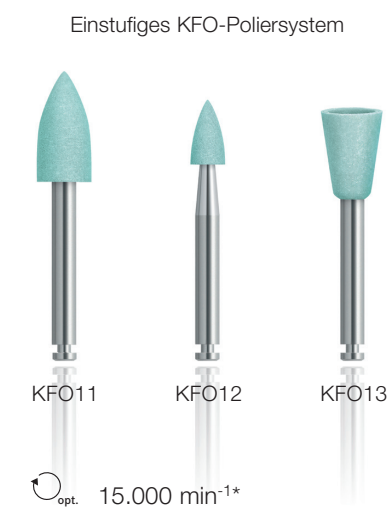

* Bitte mit Wasserkühlung und drucklos arbeiten.

